

Pantone 326C  
Pantone 1945C  
Pantone 425C  
Black

18.5 inches Width

# ENZYMAX EARTH<sup>®</sup>

Concentrated Ultrasonic Detergent & Presoak  
Détergeant et Produit de Trempage  
Concentré Ultrasonique

- Environmentally friendly | Écologique\*
- Fast acting dual enzyme cleaning  
Nettoyage à double enzyme à action rapide
- Advanced Steelgard™ corrosion protection  
Protection avancée contre la corrosion Steelgard™
- Mineral deposit elimination  
Élimination des dépôts organiques

\* Biodegradable formula according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) testing.  
Formule biodégradable conformément aux normes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

IMS-1336 | 1 US GALLON (3.8L)

**Hu-Friedy**

## DIRECTIONS | INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

For professional use only. Shake well before using. Use with water 90°-140°F (32°-60°C), demineralized water is ideal.

**Presoak:** Add 1 fl. oz. (30ml) of concentrate per 1 gallon (3.8L) of water. Soak for 3-5 minutes. Rinse thoroughly. **Linen Presoak:** Add 2 fl. oz. (60ml) per 1 gallon (3.8L) of water. Soak clothing for 10 minutes. Proceed with normal washing. **Ultrasonic Cleaning:** Add 1 fl. oz. (30ml) of concentrate per 1 gallon (3.8L) of water. After cleaning, rinse and dry thoroughly. **Evacuators:** Add 2 fl. oz. (60ml) per 1 gallon (3.8L) of water. Insert evacuator hose, turn system on full open for one minute. Suggested maintenance twice weekly.

**Store in a cool, dry place. Change daily or when visibly soiled.**

Réservé à un usage professionnel. Bien secouer avant usage. Utiliser idéalement avec de l'eau déminéralisée et à une température située entre 90° à 140° F (32° à 60° C).

**Trempage:** Ajouter 30 ml (1 once liquide) de concentré par gallon (3,8 l) d'eau. Laisser tremper pendant 3 à 5 minutes. Rincer abondamment. **Trempage de textiles:** Ajouter 60 ml (2 onces liquides) par gallon (3,8 l) d'eau. Laisser tremper le textile pendant 10 minutes. Laver ensuite normalement. **Nettoyage ultrasonique:** Ajouter 30 ml (1 once liquide) de concentré par gallon (3,8 l) d'eau. Après nettoyage, rincer abondamment et bien sécher.

**Évacuateurs:** Ajouter 60 ml (2 onces liquides) par gallon (3,8 l) d'eau. Insérer le tuyau de l'évacuateur et mettre le système en position ouverte pendant une minute. Entretien conseillé deux fois par semaine.

**Stocker dans un endroit frais et sec. Changer la solution tous les jours ou dès qu'elle paraît sale.**

**Manufactured for | Fabriqué pour :** Hu-Friedy Mfg. Co., LLC  
3232 N. Rockwell Street, Chicago, IL 60618 | USA

**Telephone | Téléphone :** 1-800-Hu-Friedy or 1-773-975-6100

**Website | Site web :** Hu-Friedy.com

**Europe:** Zweigniederlassung Deutschland  
Kleines Öschle 8 | D-78532 Tuttlingen

**Telephone | Téléphone :** 00800 48 37 4339 **Website | Site web :** Hu-Friedy.eu

**24-Hour Number | Numéro 24 heures/24 :** 1-800-535-5053

**International :** 1-352-323-3500



**DANGER**

Causes serious eye damage. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear eye protection/face protection. Wear respiratory protection. **IF INHALED:** If breathing is difficult, remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. Porter un équipement de protection respiratoire. **EN CAS D'INHALATION:** s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.




CANADA IMPORTER USE ONLY  
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS

SDS available on request or at Hu-friedy.com.  
FS disponible sur demande ou au Hu-Friedy.com.  
K8500/0217

VENDOR USE ONLY

Made in USA | Fabriqué aux États-Unis

**BAR CODE FPO**  
+D6717253581%

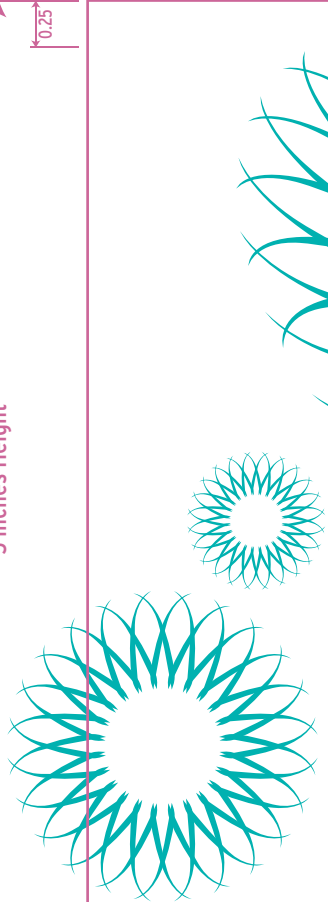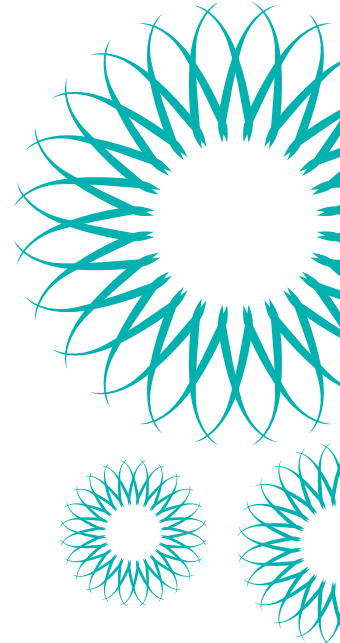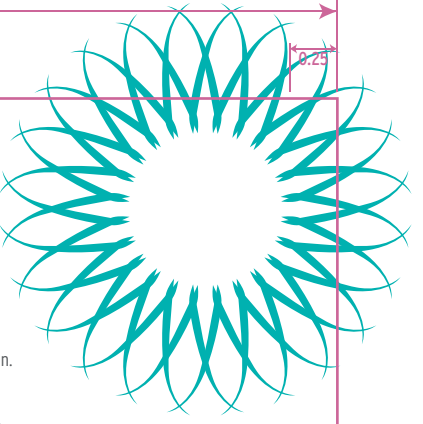

5 inches Height

0.25"

0.25"

0.25"

0.25"